

UFI FILTERS MEDICAL MASK MONOUSO PER BAMBINI


TRE STRATI PROTETTIVI

EFFICIENZA FILTRANTE	≥ 95%
PRESSIONE DIFFERENZIALE	< 40 Pa/cm ²
PULIZIA MICROBICA	≤ 30 cfu/g



1 TESSUTO NON TESSUTO RESISTENE ALL'ACQUA

Filtrazione di
particelle di dimensioni
 $3.0 \pm 0.3 \mu\text{m}$

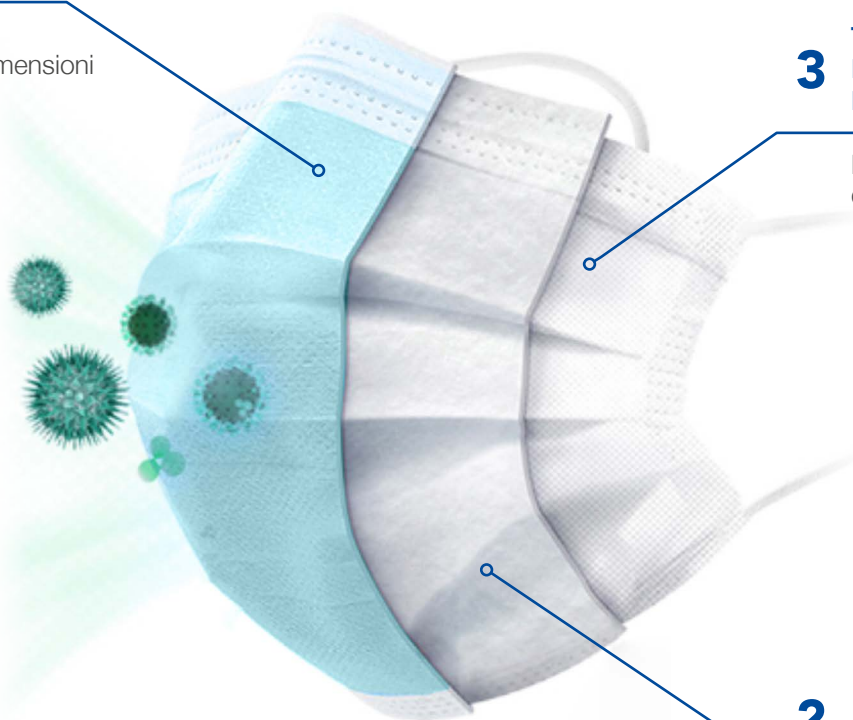

3 TESSUTO NON TESSUTO IGROSCOPICO

Delicato, confortevole
e traspirante

2 MELTBLOWN

Doppio rinforzo,
previene il passaggio
di polveri



UFI FILTERS
CHOSEN BY THE BEST

www.ufifilters.com

UFI FILTERS MEDICAL MASK MONOUSO PER BAMBINI

CARATTERISTICHE

- + Mascherina a tre strati con elastici per le orecchie e clip per il naso regolabile.
- + Prodotti secondo lo standard EN 14683:2019 standard Type 1.
- + La linea produttiva è situata in UFI Filters Shanghai.
- + Le mascherine vengono fornite in imballi singoli di plastica per preservarne la pulizia e prevenire la contaminazione.
- + Devono essere conservate in un ambiente pulito, ventilato e asciutto, lontano dalla luce diretta e fiamme libere.
- + Durata di utilizzo consigliata: non più di 4 ore.
- + Scadenza: 2 anni.

CLIP PER NASO CON
SALDATURA A
ULTRASUONI



ELASTICI PER ORECCHIE
SALDATI CON
ULTRASUONI

20 PEZZI
IN CONFEZIONI SINGOLE



 LIGHT
BLUE



35.011.70

2020 – Copyright © UFI FILTERS spa



UFI FILTERS
CHOSEN BY THE BEST

www.ufifilters.com